

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ**



**Силиконовая  
зубная щетка  
на палец  
CS Medica KIDS CS-502**

**EAC**



**Благодарим Вас за приобретение силиконовой  
зубной щетки на палец CS Medica KIDS CS-502!**




Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в середине настоящего руководства по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

Силиконовая зубная щетка на палец CS Medica KIDS CS-502 предназначена для очищения полости рта детей в возрасте от 4 месяцев. Зубная щетка надевается на палец взрослого и позволяет проводить чистку первых зубов, а также мягкий массаж десен ребенка с целью облегчения дискомфорта и болевых ощущений при прорезывании зубов.

Щетка изготовлена из мягкого силикона без добавления красителей и абсолютно безопасна для малыша.

Щетка имеет в комплекте удобный футляр для хранения и транспортировки.

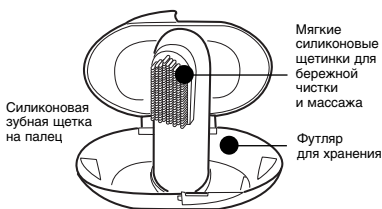

#### Использование

Перед первым, а также после каждого последующего применения производите очистку/дезинфекцию щетки (см. пункт «Очистка и дезинфекция»).

Для использования необходимо надеть щетку на указательный палец взрослого и аккуратными массажными движениями произвести очистку ротовой полости ребенка. Возможно использование со специальными детскими пастами/гелями.

#### Меры предосторожности:

Перед использованием осматривать на предмет наличия повреждений и/или следов износа. Заменить при обнаружении дефектов (трещин, вздутия, следов износа и тд).

Щетка не является игрушкой! Хранить в недоступном для детей месте.

#### Очистка и дезинфекция

Перед первым, а также последующими применениями тщательно промойте щетку, например, с использованием средств для мытья детской посуды, и обильно ополосните под струей воды.

Допускается обработка в стерилизаторе и кипячение при температуре не более 120 °С в течение не более 5 минут.

**Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте, вдали от огня, высоких температур, попадания прямых солнечных лучей.

Хранить вне зоны досягаемости насекомых.

Перед тем, как поместить щетку в футляр, дождитесь полного ее высыхания.

**Утилизация**

Допускается утилизация с бытовыми отходами.

**Технические характеристики**

Наименование	Силиконовая зубная щетка на палец CS Medica KIDS
Модель	CS-502
<b>Условия эксплуатации:</b>	
температура окружающего воздуха	от 0 до +50 °С
относительная влажность	от 30 до 85%
<b>Условия хранения и транспортирования:</b>	
температура окружающего воздуха	от –20 до +60 °С
относительная влажность	от 10 до 95%
атмосферное давление	от 700 до 1060 гПа
Масса	Не более 26 г
Габаритные размеры	не более 95 x 70 x 10 мм (ШxВxГ)
Используемые материалы	щетка: 100% силикон футляр – полипропилен
Срок хранения с момента производства	5 лет
Срок службы	6 месяцев
Срок гарантии	6 месяцев
Комплект поставки	Силиконовая зубная щетка на палец, футляр для хранения, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

Специальные условия реализации не установлены

**Дата производства**

ЛОТ номер расположен на упаковке и имеет структуру YYMNNN, где YY обозначает последние две цифры года производства, М – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNN – номер партии

**Условные обозначения**

Условные обозначения, значки, символы и пиктограммы, которые могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации, имеют следующую расшифровку:



Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза



Производитель



Обратитесь к руководству по эксплуатации



Температурный диапазон /  
Диапазон влажности /  
Ограничение атмосферного  
давления



Для детей от 4 месяцев



Не содержит Бисфенол А

**LOT**

ЛОТ номер

**Сертификационные данные**

Свидетельство о государственной регистрации  
№ KG.11.01.09.014.E.003931.10.18 от 01.10.2018  
Декларация о соответствии  
№ ЕАЭС N RU Д-СН.АД53.В.01400/18 от 16.10.2018.  
Срок действия до 15.10.2023 г. включительно

**Гарантийный талон**

**Срок гарантии: 6 месяцев**

**Срок службы: 6 месяцев**

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Подпись  
продавца \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания  
ознакомлен, внешний вид проверил,  
товар в полной комплектации получил

Подпись  
покупателя \_\_\_\_\_

Дата обращения

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Заключение мастера,  
выполненные работы

---

---

---

---

---

---

---

Дата выдачи (возврата)  
прибора потребителю

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Подпись  
или штамп мастера

Работу принял

\_\_\_\_\_  
(подпись клиента)

**Адреса региональных торговых  
представительств и центров технического  
обслуживания продукции CS Medica в России**

Адрес и телефон  
 Центра технического обслуживания в Москве:  
 ООО «СиЭс Медика ТехЭксперт»  
 127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3  
 (м. «Маяковская»)  
**Тел/факс:** (499) 995-11-32 (многоканальный)  
 cstechexpert@mail.ru  
**www.cstechexpert.ru**  
 Часы работы Центра технического обслуживания  
 в Москве:  
 пн-пт: с 9:30 до 19:00 (без перерыва на обед),  
 сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед),  
 вс и праздничные дни – выходной

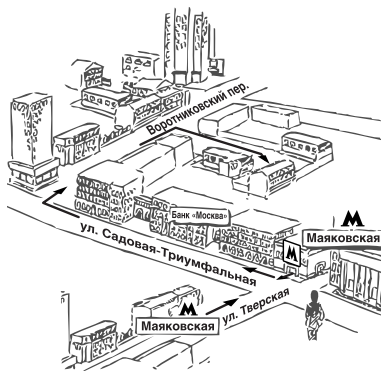


Схема расположения  
 Центра технического обслуживания в Москве

- Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz\_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs\_medicarm@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье», ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, rotogio@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Архирейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41 тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерещкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф. 24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский пр-т., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru
- Воронеж, Офис «СиЭс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru  
Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, med@csmedica-ural.ru  
Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru
- Иваново, ООО «СиЭс Медика Иваново», ул. Степанова, д. 5, оф. 105, (4932) 26-76-90, 26-76-10, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74 office30@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЭс Медика Йошкар-Ола», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, cst@mar-el.ru
- Казань, ООО «СиЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru  
Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 528-01-70, cskzn5@mail.ru



- Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica\_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kemerovo@csmedica.ru
- Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vyatka@csmedica.ru
- Кострома, ООО «СиЭс Медика Иваново», пр-т Мира, д. 51, тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СиЭс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, omron@kubannet.ru  
Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЭс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СиЭс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mgn@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала», ул. Батырая, д. 11, оф. 734, тел.: (8722) 55-85-40, (928) 941-00-20, csmahachkala@mail.ru
- Минеральные Воды, ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicasktv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика Югра», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, тел.: (908) 873-30-47, моб.: (902) 855-85-01, cstyumen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Новокузнецк», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (3843) 60-05-18, 46-46-44 novokuznetsk@csmedica.ru
- Новороссийск, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Педнева, д. 5, тел.: (8617) 75-15-00, +7-938-525-15-00, cs\_medicanov@mail.ru
- Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru

- Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, csmedika\_omsk@mail.ru
- Орел, ООО «СиЭс Медика Орел», ул. Московская, д.80, тел.: (4862) 54-24-00, orel@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЭс Медика Подмоскowie», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28, csposdmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, permt@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия», ул. Маршала Мерцакова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Леопа Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Росошь, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rосоsch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, стр. 1, оф. 306, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, csmedica-samara@samara.ru  
Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114, тел.: (846) 267-38-40, csmedica-samara@samara.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», Малодеткосельский пр-т, д. 36, лит. Н, тел.: (812) 309-09-80, csnw@csmedica.ru  
Сервисно-консультационный центр, Малодеткосельский пр-т, д. 36, лит. Н, тел. (812) 409-40-30, spbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СиЭс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, csmsaratov@mail.ru
- Саров, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, ar2\_cs1@bk.ru, ar2\_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», пр-т Победы, д. 54, пом. 37, тел.: (978) 137-90-68, (910) 416-59-55, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СиЭс Медика Смоленск», пр-т Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru

- Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар),  
Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1,  
тел.: (8622) 61-57-65, cs\_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЭс Медика Ставрополь»,  
ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93,  
csmedicastv@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СиЭс Медика Белгород»,  
ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol\_cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЭс Медика Югра»,  
ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №10,  
тел.: (3462) 25-46-17, моб.: (912) 817-41-41  
cstyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru
- Тамбов, ООО «СиЭс Медика Тамбов», ул. Ореховая,  
д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЭс Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23,  
тел.: (4822) 32-89-66, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара», 6-й Гая, д. 1а, оф. 6,  
тел.: (8482) 74-88-89, csmedica-tt@yandex.ru
- Томск, ООО «СиЭс Медика Томск»,  
ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж,  
тел.: (3822) 902-703, info\_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149,  
тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень»,  
ул. Холодильная, д. 142, оф. 12, тел.: (3452) 34-22-70,  
(932) 321-46-21, cstyumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Терешковой,  
д. 6, оф. 43, тел.: (3012) 23-01-61, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород),  
Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128,  
csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан»,  
ул. Натальи Ковшовой, д. 10, тел.: (3472) 34-18-08,  
csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток  
и Забайкалье», ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3,  
тел.: (4212) 41-12-65, csmedica-amur@yandex.ru
- Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Чебоксары»,  
ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31,  
csmp-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЭс Медика Челябинск»,  
ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда»,  
пр-т Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63,  
моб.: (921) 834-78-65, csmedicascheropovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье»  
(Хабаровск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10,  
тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону»,  
ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53,  
shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль»,  
ул. Саптыкова-Шедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 90-66-53,  
20-12-50, 73-11-82 yaroslavl@csmedica.ru



Произведено по заказу  
и под контролем  
ООО «СиЭс Медика»

Импортером и уполномоченным представителем  
производителя, официальным представителем  
торговой марки CS Medica на территории  
Российской Федерации, а также государств-  
членов Таможенного союза является фирма  
ООО «СиЭс Медика»

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3

**Тел./факс:** (495) 363-16-52, (495) 363-16-56

**E mail:** csinfo@csmedica.ru

**www.csmedica.ru**

**Бесплатная горячая линия  
по России: 8-800-555-00-80**

**Производитель**  
POLYBELL (GUANGZHOU) LIMITED  
(ПОЛИБЕЛЛ (ГУАНЧЖОУ) ЛИМИТЕД)  
No.8, Fangshi Industrial Zone, Renhe Town,  
Baiyun District, Guangzhou, China  
(Но.8, Фангши Индастриал Зоун, Ренхе Таун,  
Байюнь Дистрикт, Гуанчжоу, Китай)

Сделано в Китае